



Technische Daten:

Gesamtlänge:	2325 mm
Gesamtbreite:	830 mm
Gesamthöhe:	1100-1500 mm
Einstiegshöhe:	600 mm
Strom:	230 V, 50Hz
Wasser:	2 x 3/4", 1 x 1/2"
Abwasser:	DN 40
Gewicht:	ca. 250 kg

Unterfahrbares Wannensystem für die Pflege von Menschen - **Verbreiteter Wannenkörper**

Unsere Hubwanne TR 900 Modell HIGHLINE ist für Pflegebäder entwickelt worden. Der spezielle Wannenkörper in Schlüsselloch Form, bietet genügend Platz für die Bewohner Patienten. An der Wanne kann mit TR-, sowie gängigen

Liftersystemen gearbeitet werden. Die Wanne ist schnell aufgestellt und kann leicht installiert werden. Diverse Erweiterungen für die Wanne runden das Gesamtpaket ab und lassen keine Wünsche offen.



Luftdruckschalter zur Höhenverstellung

Thermostatmischer 3/4" mit Verbrühschutz



TR 900 - HIGHLINE

PFLEGE- UND HUBWANNE



ART.: 900

- Ergonomische Form des Wannenkorpus
- Wannenkorpus aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Tragegestell mit verstellbaren Standfüßen
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Bodenfreiheit für fahrbare Liftersysteme
- Elektrische Höhenverstellung über zwei Luftschalter
- Arbeitshöhe 600-1000 mm

ART.: 900 A

- Hubwanne wie zuvor beschrieben, jedoch mit automatischer Wannenbefüllung

OPTIONEN:

C - Reinigungssystem mit Schlauch und Handbrause


W - Whirlsystem mit verstellbarer Frontdüse

VA - Wannenkörper aus Edelstahl für Brandverletzte



Wir empfehlen zu dieser Wannen unseren TR-Sitz- oder Liegelifter.

Technische Änderungen vorbehalten!

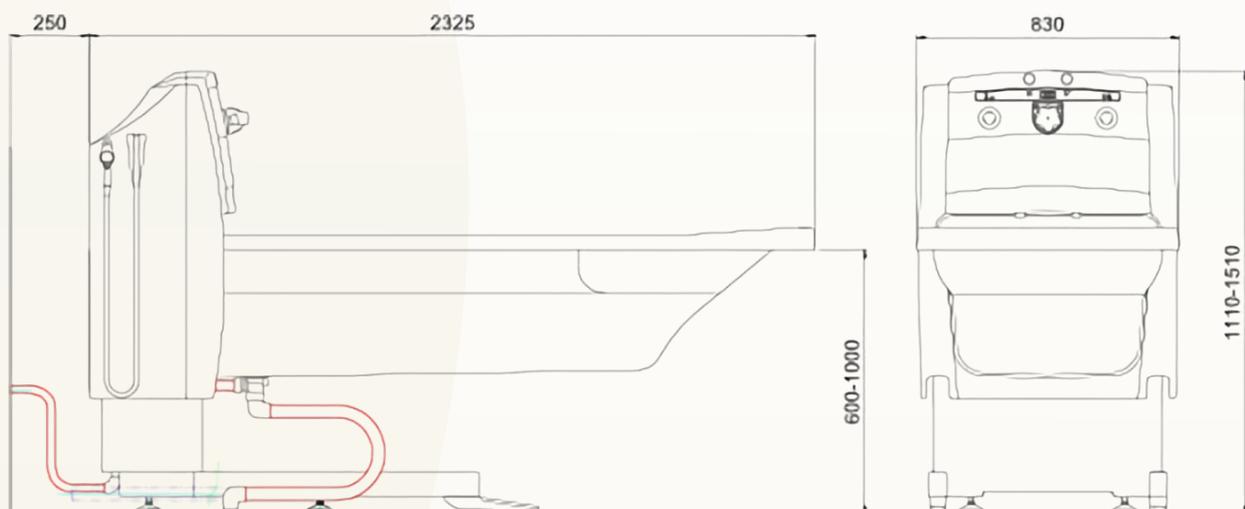

TranspoRehaMed GmbH

Grünbaumstr. 89
42659 Solingen

info@transporehamed.de

Tel.: +49 (0)212-645850-0
Fax: +49 (0)212-645850-50

www.transporehamed.de