

GURTLIFTER **ARNOLD** 150 - TR3510

ELEKTRISCH



CE



Elektro-Gurtlifter Arnold 150 - TR3510

Der kostengünstige Passivlifter....

Ein Gurtlift für den täglichen Patiententransfer in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Der Gurtlift eignet sich besonders gut für das schwere Heben vom Bett, vom Rollstuhl, in und aus einer Pflegewanne, sowie auf eine Toilette. Die Hebevorgänge können leicht und sicher mit dem Gurtlifter 3510 von nur einer Pflegekraft durchgeführt werden. Das mechanisch verstellbare Fahrgestell hilft dabei, die verschiedensten Hindernisse unter dem Bett, Rollstuhl und Wanne zu umfahren, daher benötigt er nur wenig Platz zum manövrieren. Der Lifter lässt sich mit ein paar Handgriffen zusammenklappen und platz sparend verstauen.

Spezifikationen TR 3510:

Gesamtbreite:	650 - 1000 mm
Gesamttiefe:	1100 mm
Gesamthöhe:	Max. 1850 mm
Hubbereich:	1220 mm
Max. Nutzlast:	150 kg
Leergewicht:	50 kg
Höhenverstellung:	Elektrisch über Kabelhandbedienung, 24 V Batteriebetrieben
Akkuüberwachung:	Lichtsignal bei schwachen Akkus

GURTLIFTER *ARNOLD* 150 - TR3510

ELEKTRISCH



Vorteile / Eigenschaften:

- Leise und sanfte Höhenverstellung über Kabel-Handbedienung
- Sicherheits-Fahrgestell mit 4 Doppellenkrollen D=100 mm für einen leichten Lauf, 2 mit Bremsfunktion
- Rahmengestell mit einer strapazierfähigen Pulverbeschichtung
- 2-Punkt Gurtbügel für die Aufnahme von Schlaufengurten
- Elektrische Höhenverstellung mit integrierter Notabsenkung
- Mechanische Fahrgestellspreizung
- Steuereinheit mit Notstopp und integriertem Ladegerät und Ladekabel
- Wechselakku 24 V

Optional erhältlich:

- Digitalwaage



Modelle:

TR 3510	Standard	Gurte mit Schlaufen
TR 3510-W	Mit Waage	Gurte mit Schlaufen



Hubantrieb mit mechanischer Notabsenkung




Fahrgestell mit mechanischer Fahrgestellspreizung



Steuereinheit mit Notstopp und integriertem Ladegerät

Technische Änderungen vorbehalten!

Masse in cm

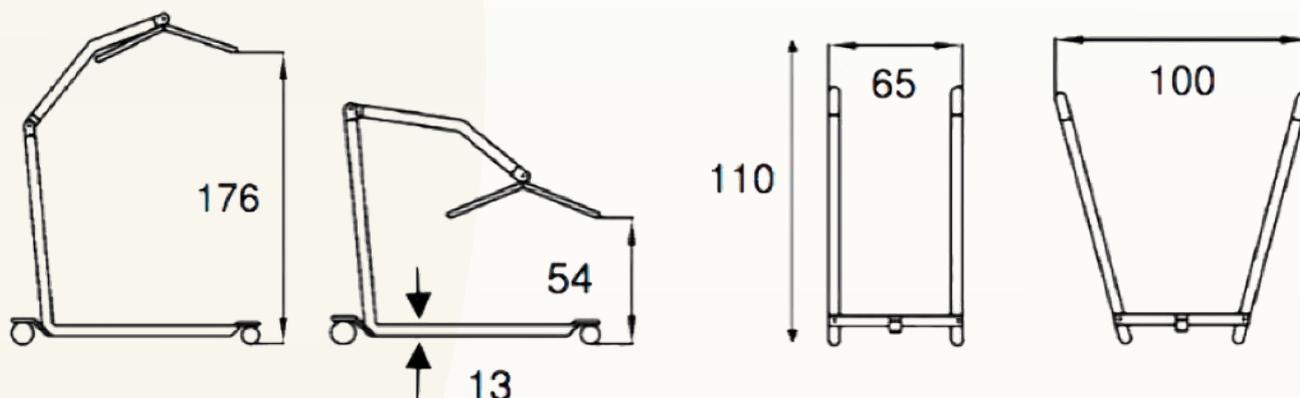

TRanspoRehaMed GmbH

Grünbaumstr. 89
42659 Solingen
info@transporehamed.de

Tel.: +49 (0)212-645850-0
Fax: +49 (0)212-645850-50
www.transporehamed.de